


## GEBRUIK VAN EEN AEROLIZER (Foradil – Miflonide)

beschermkapje



mondstuk      uitsparing voor capsule

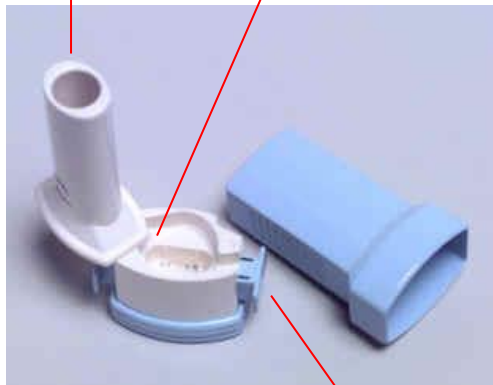

drukknoppen

### RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

1. Neem een rechthoudende houding aan.
2. Verwijder het beschermkapje van de inhalator.
3. Laad de inhalator: draai het mondstuk van de inhalator open. Neem 1 capsule uit de blister, zorg ervoor dat uw handen droog zijn. Plaats de capsule in de uitsparing van de inhalator.
4. Sluit de inhalator door het mondstuk terug te draaien.
5. Druk gelijktijdig op de knoppen aan de zijkant. Doe dit slechts 1 keer! Hierdoor wordt de capsule doorprikt.
6. Houd de inhalator aan de voor- en achterkant vast. Laat de zijkanten vrij.
7. Houd de kin een beetje omhoog en adem goed uit, maar **niet** door de inhalator.
8. Neem het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de lippen.
9. Adem rustig en zo diep als u kan in langs de mond. U zal de capsule horen rollen.
10. Neem het mondstuk uit de mond en houd uw adem gedurende 5 à 10 seconden in.
11. Adem rustig uit, maar **niet** door de inhalator
12. Open de inhalator en controleer of de capsule volledig leeg is. **Zo niet** → herhaal stap 7 tot 11.
13. Gooi de capsule weg.
14. Spoel de mond met water en spuw het water weer uit, zodat er geen medicatie in uw mond achterblijft.
15. Na gebruik kan u het mondstuk afwrijven met een droog doekje.
16. Zet het beschermkapje weer op de inhalator.