


# AEROLIZER (Foradil, Miflonide)

## Hoe de capsules gebruiken met de inhalator?

Gebruik de capsules enkel met het inhalatieapparaat dat meegeleverd werd in de verpakking.

1. Verwijder de capsule uit de blisterverpakking juist voor het gebruik.  
Zorg ervoor dat uw vingers volledig droog zijn zodat de capsule niet nat wordt.
2. Slik de capsule NIET in. Het poeder in de capsule mag enkel gebruikt worden voor inhalatie.

## De Aerolizer bestaat uit de volgende delen:

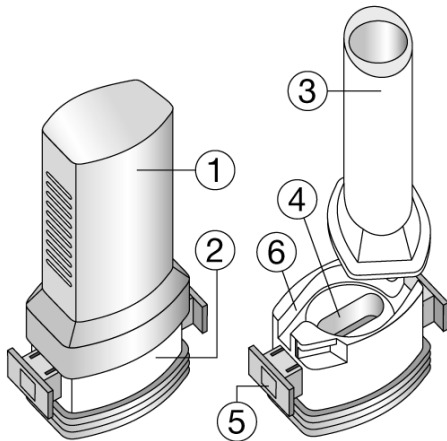


1. Een **blauwe kap** om het mondstuk van de basis te beschermen
2. Een **basis** die de juiste vrijlating van het geneesmiddel uit de capsule toelaat

De basis bestaat uit:

3. Een mondstuk
4. Een capsulekamer
5. Een blauwe knop met “vleugeltjes” (zijstukken) en naalden op beide zijden
6. Een kanaal voor het inlaten van lucht

## Instructies voor een correct gebruik

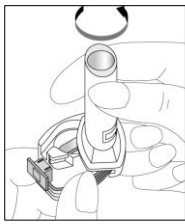

1. Verwijder het kapje door het recht naar boven te trekken.


2. Open de capsulekamer. Houd het onderstuk stevig vast en draai het mondstuk in de richting van de pijl.



3. Zorg ervoor dat uw vingers volledig droog zijn.

Neem één capsule uit de blisterverpakking juist vóór het gebruik en leg de capsule plat in de bodem van de capsulekamer.


**BELANGRIJK:** Steek de capsule **NIET** langs boven in het mondstuk!

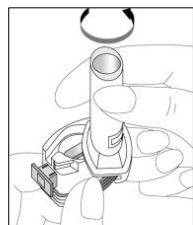


4. Draai het mondstuk opnieuw naar de gesloten toestand totdat u een klik hoort.

5. Om het poeder vrij te maken uit de capsule:

- Hou de Aerolizer rechtop met het mondstuk naar boven.
- Druk de blauwe knoppen één enkele keer volledig in (krakend geluid)
- Laat de blauwe knoppen weer los.

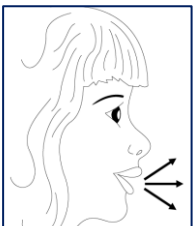


6. Adem volledig uit.

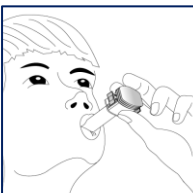

7. Plaats het mondstuk in uw mond en houd het hoofd lichtjes achterover.


- Sluit uw lippen **krachtig** rond het mondstuk.
- Adem **snel maar krachtig** in en **zo diep als u kan**.

=> Zo komt het geneesmiddel diep in uw luchtwegen.

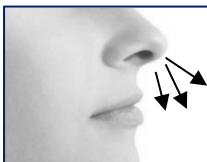

8. Nadat u hebt ingeademd via de Aerolizer, houd u **uw adem zo lang als mogelijk in**, terwijl u het inhalatieapparaat uit de mond neemt.

Adem dan uit via de neus. Open de capsulekamer om na te kijken of er soms poeder achtergebleven is. Is dit het geval, herhaal dan de stappen 6 tot 8.

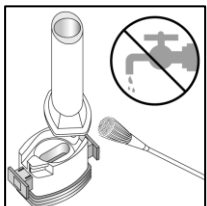

9. Open de capsulekamer nadat u alle poeder hebt op gebruikt (zie stap 2).

Verwijder de lege capsule en gebruik een DROGE doek of een zachte borstel om achtergebleven poeder te verwijderen.

Sluit het mondstuk en plaats het kapje terug.



10. **Spoel** uw mond **met water** en spuw het water weer uit.

**STAP 5:**

N.B: In dit stadium kan de capsule in stukjes barsten en kleine deeltjes gelatine zouden uw mond of keel kunnen bereiken. De kans hierop is lager indien men maar één keer de capsule doorboort, men de bewaarinstructies opvolgt en indien men de capsule net vóór gebruik uit zijn verpakking haalt. De gelatine is eetbaar, dus niet schadelijk.

**STAP 7:**

N.B: U moet een ronddraaiend geluid horen wanneer de capsule rond haar as draait. Als u dit geluid niet hoort, open de capsulekamer en controleer of de capsule los ligt in de capsulekamer. Herhaal dan stap 7. Probeer de capsule NIET los te krijgen door herhaaldelijk de knoppen in te drukken.

**De verzorging van uw inhalator:**

Het is aanbevolen om het mondstuk van uw inhalator wekelijks te reinigen met een **schoon, droog tissue of doekje**. Uw inhalator mag **niet met water** gewassen worden.

**FILMPJE dat toont hoe iemand de puffer gebruikt: zie onderstaande link:**

<https://www.youtube.com/watch?v=b4dNzJWD4Y4&t>

Naam Document: Informatiefiche puffers	Documenthouder:
Typwerk: Thaïsa Cogen – bevoegde afdeling: Apotheek	Goedgekeurd door:
In voege op: augustus 2020	Uitgeprint op