

BREEZHALER (Onbrez, Seebri, Ultibro)

Breezhaler capsules moeten altijd in de doordrukstrip worden bewaard en uitsluitend **direct voor gebruik uit de verpakking** worden gehaald. **Slik** de capsules **niet** in.

Gebruik altijd de nieuwe inhalator die in uw verpakking wordt geleverd. **Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik**. Bewaar de capsules **niet** in de inhalator.


Instructies voor een correct gebruik



1. Verwijder het kapje door het recht naar boven te trekken.



2. Open de capsulekamer. Houd het onderstuk stevig vast en klik het mondstuk in de richting van de pijl open.

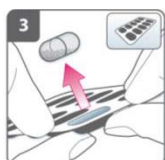

3. Zorg ervoor dat uw vingers volledig **droog** zijn. Neem één capsule uit de blisterverpakking juist vóór het gebruik en leg de capsule **plat in de bodem** van de capsulekamer.



4. Stop de capsule in de uitsparing voor de capsule.


BELANGRIJK: Steek de capsule **NIET** langs boven in het mondstuk!




5. Sluit de inhalator tot u een **klik** hoort.




6. Houd de inhalator rechtop met het mondstuk naar boven gericht. **Prik de capsule door**, door beide knoppen aan de zijkanten gelijktijdig stevig in te drukken. **Doe dit slechts één keer**. U moet een klik horen wanneer de capsule wordt doorgeprik.

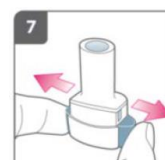

7. Laat de knoppen aan de zijkanten helemaal los.

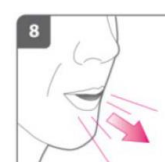

8. Adem **volledig** uit, voordat u het mondstuk in uw mond plaatst. Blaas **niet** in het mondstuk.

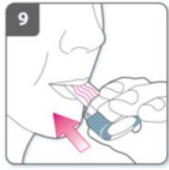

9. Houd de inhalator vast zoals op plaatje. Druk de knoppen aan de zijkanten **niet** in:

- Stop het **mondstuk in uw mond** en sluit uw lippen er **stevig** om heen.
- Adem **snel**, maar rustig in en **zo diep** als u kunt.




10. Als u inademt door de inhalator, draait de capsule rond in de houder en moet u **een zoemend geluid** horen. U zult een zoete smaak proeven als het geneesmiddel naar uw longen gaat.

Als u geen zoemend geluid hoort: De capsule kan vastzitten in de capsulehouder. Open de inhalator en maak de capsule voorzichtig los door op de onderkant van de inhalator te tikken. Druk de knoppen op de zijkanten **niet** in.
Inhaleer opnieuw het geneesmiddel door stappen 8 en 9 te herhalen.



11. **Houd uw adem ten minste 5-10 seconden in**, nadat u het geneesmiddel heeft geïnhaleerd, terwijl u de inhalator uit uw mond neemt. **Adem vervolgens uit.** Open de inhalator om te zien of er enig poeder is achtergebleven in de capsule.

Als er poeder is achtergebleven in de capsule: Sluit de inhalator.
Herhaal de stappen 8, 9, 10 en 11. Meestal kan je de capsule legen in 1 à 2 inhalaties.

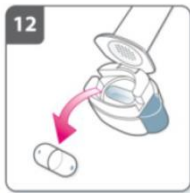

12. **Na het inhaleren:**

- Open opnieuw het mondstuk
- Verwijder de lege capsule
- Gooi de lege capsule weg met uw huisvuil
- Sluit de inhalator en doe het beschermkapje er weer op



13. **Spoel uw mond met water** en spuw het water weer uit.

De verzorging van uw inhalator:

Het is aanbevolen om het mondstuk van uw inhalator wekelijks te reinigen met een **schoon, droog tissue of doekje**. Uw inhalator mag **niet met water** gewassen worden.

FILMPJE dat toont hoe iemand de puffer gebruikt: zie onderstaande link:

<https://www.youtube.com/watch?v=3TxeHPxfmhA&feature=youtu.be>

Naam Document: Informatiefiche puffers	Documenthouder:
Typwerk: Thaïsa Cogen – bevoegde afdeling: Apotheek	Goedgekeurd door:
In voege op: augustus 2020	Uitgeprint op