


GEBRUIK VAN EEN BREEZHALER

(Onbrez - Seebri - Ultibro)

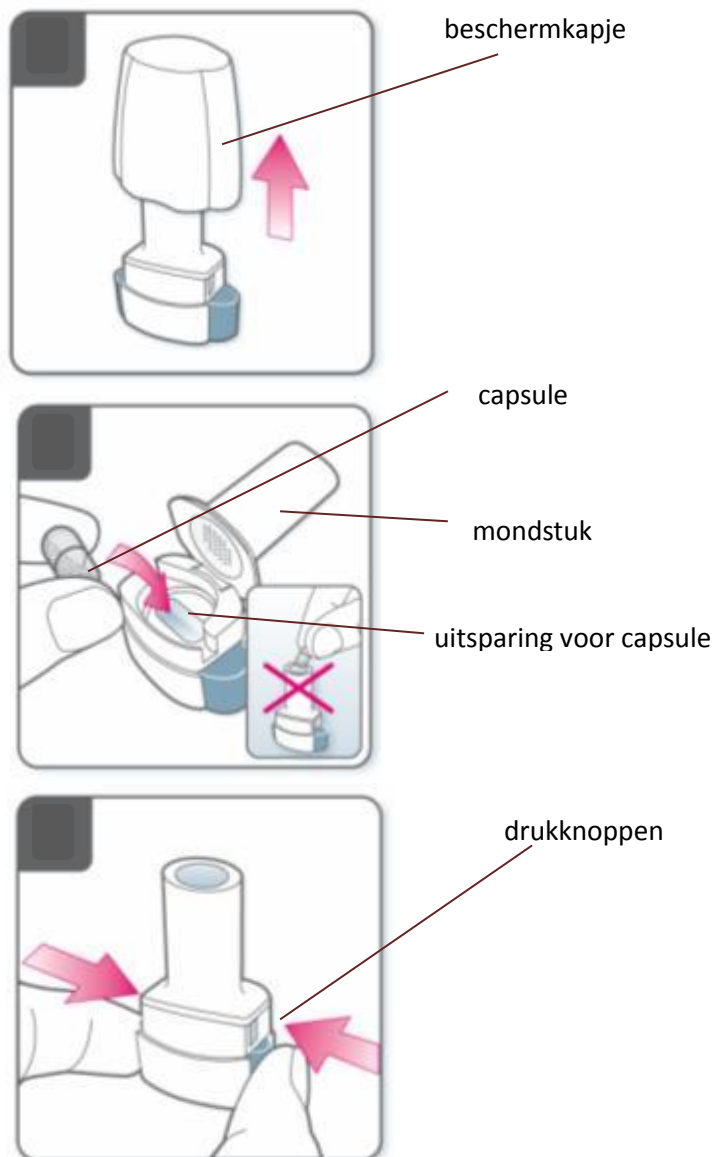

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

1. Neem een rechtzittende houding aan.
2. Verwijder het beschermkapje van de inhalator.
3. Inhalator laden: klap het mondstuk van de inhalator open. Neem 1 capsule uit de blister, zorg dat uw handen droog zijn. Plaats de capsule in de uitsparing van de inhalator.
4. Sluit de inhalator, u moet hierbij een klik horen.
5. Druk gelijktijdig op de knoppen aan de zijkant, doe dit maar 1 keer! U hoort een klik als de capsule doorpikt is.
6. Houd de inhalator aan de voor- en achterkant vast, laat de zijkanten vrij.
7. Houd de kin een beetje omhoog en adem goed uit, maar **niet** door de inhalator.
8. Neem het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de lippen.
9. Adem rustig en zo diep als u kan in langs de mond, u zal de capsule horen trillen.
10. Neem het mondstuk uit de mond en houd uw adem gedurende 5 à 10 seconden in.
11. Adem rustig uit, maar **niet** door de inhalator.
12. Open de inhalator en controleer of de capsule volledig leeg is; **zo niet** → herhaal stap 7 tot 11.
13. Gooi de capsule weg.
14. Spoel de mond met water en spuw het water weer uit.
15. Na gebruik kan u het mondstuk afwrijven met een doekje en plaats het beschermkapje weer op de inhalator.