


ELLIPTA (Trelegy, Anoro, Incruse, Relvar)

De verpakking bestaat uit de volgende delen:

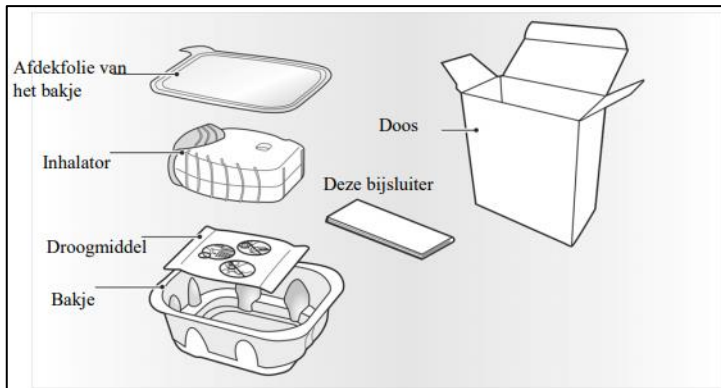

De inhalator is verpakt in een bakje. Trek de afdekfolie van het bakje om deze te openen. Het bakje bevat een zakje met droogmiddel om het vochtgehalte te verminderen. Gooi dit zakje met droogmiddel weg – het mag **niet** worden geopend, opgegeten of geïnhaleerd.

Instructies voor een correct gebruik

1. Lees dit voor u begint:

Dosisteller

Deze geeft aan hoeveel geneesmiddeldoses nog aanwezig zijn in de inhalator. **Voor het eerste gebruik, toont de inhalator precies 30 doses.** Hij telt af met **1** iedere keer dat u de beschermkap opent. **Wanneer er minder dan 10 doses in de inhalator zitten, is de helft van de dosisteller roodgekleurd.** Nadat u de laatste dosis heeft gebruikt, **is de helft van de dosisteller rood en wordt het nummer 0 weergegeven.** Uw inhalator is nu leeg. Als u de beschermkap hierna opent, verandert de dosisteller van half rood naar volledig rood.

Beschermkap


Iedere keer dat u deze opent, maakt u één dosis geneesmiddel klaar.

The diagram shows the Ellipta inhaler with a dosimeter window displaying the number 30 and a protective cap. A line connects the dosimeter text to the window, and another line connects the protective cap text to the cap.

2. Een dosis klaarmaken:

Wacht met het openen van de beschermkap tot u klaar bent om uw dosis te inhaleren. De inhalator **niet** schudden.

- Schuif de beschermkap naar beneden tot u een 'klik' hoort.

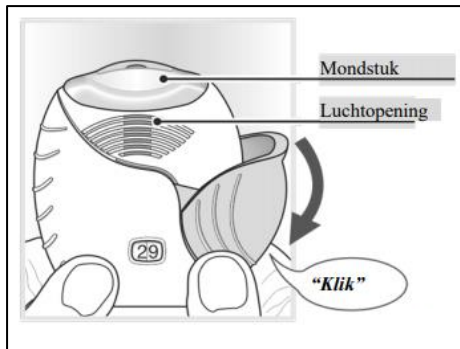

Uw geneesmiddel kan nu worden geïnhaald. De dosisteller telt met 1 af om dit te bevestigen. Als de dosisteller **niet** aftelt wanneer u de 'klik' hoort, zal de inhalator **geen** geneesmiddel afgeven. Breng hem terug naar uw apotheker voor advies.

- Uw geneesmiddel inhaleren:
Adem **zo diep mogelijk uit** terwijl u de inhalator bij uw mond vandaan houdt.
Niet uitademen in de inhalator.
- Plaats het **mondstuk tussen uw lippen en sluit uw lippen er stevig omheen**.



- Haal eenmaal lang, gelijkmatig en diep adem.** Houd uw adem **zo lang mogelijk in** (ten minste 3-4 seconden).
- Haal de inhalator uit uw mond.
- Adem langzaam en rustig uit**, weg van de inhalator.
- Mogelijk proeft of voelt u het geneesmiddel niet.
- Schuif de beschermkap zo ver mogelijk omhoog om het mondstuk te bedekken.
- Spoel** daarna uw mond **met water** en spuw het water weer uit.

De verzorging van uw inhalator:

Het is aanbevolen om het mondstuk van uw inhalator wekelijks te reinigen met een **schoon, droog tissue of doekje**. Uw inhalator mag **niet met water** gewassen worden.

FILMPJE dat toont hoe iemand de puffer gebruikt: zie onderstaande link:

<https://www.youtube.com/watch?v=h45fp0pRtB4>

Naam Document: Informatiefiche puffers

Documenthouder:

Typwerk: Thaïsa Cogen – bevoegde afdeling: Apotheek

Goedgekeurd door:

In voege op: augustus 2020

Uitgeprint op