


## GEBRUIK VAN EEN NOVOLIZER (Salbutamol – Budesonide - Formoterol)

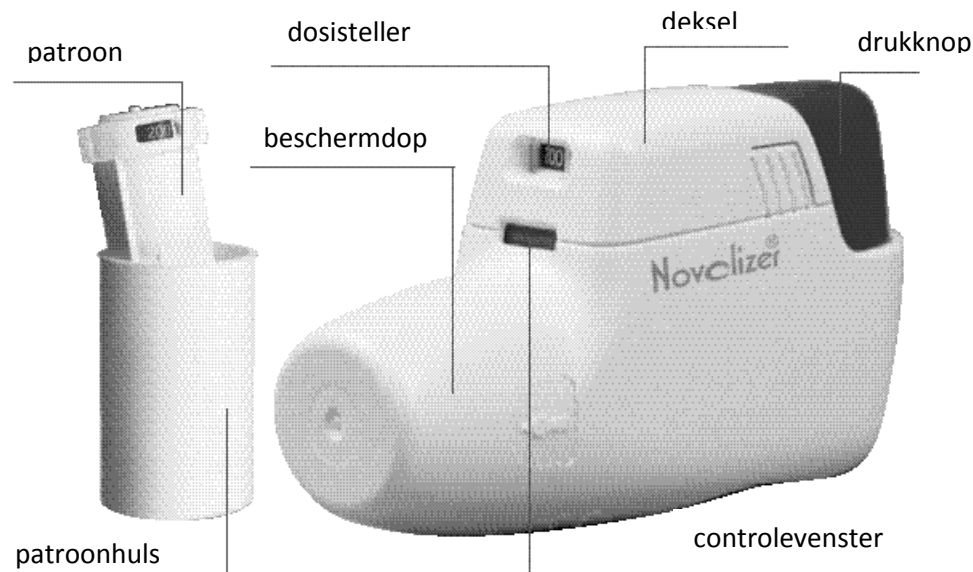

### RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

1. Neem een rechtzittende houding aan.
2. Verwijder het beschermdopje van de inhalator. Het is belangrijk dat u de inhalator steeds horizontaal houdt.
3. Inhalator laden: duw de drukknoop volledig in. Hierbij verandert het controlevenster van rood naar groen (klaar voor gebruik).
4. Houd de kin een beetje omhoog en adem goed uit, maar niet door de inhalator.
5. Neem het mondstuk in de mond en omsluit het goed met de lippen.
6. Adem snel en zo diep als u kan in langs de mond. U zal een klik horen maar het is belangrijk dat u hierna blijft inademen.

7. Neem de inhalator uit uw mond; bij een correcte inhalatie is het controlevenster opnieuw rood geworden.
  8. Houd uw adem nog 5 à 10 seconden in en adem vervolgens uit, maar niet door de inhalator.
  9. Spoel de mond met water en spuw het water weer uit.
  10. Na gebruik kan u het mondstuk afwrijven met een droog doekje; plaats het beschermkapje opnieuw op de inhalator.
- Opgelet:** bij het eerste gebruik moet u het patroon in de inhalator steken. Druk hiervoor tegelijk op de geribbelde vlakken aan beide zijden van het deksel en schuif het deksel naar voor en til het op. Verwijder de aluminiumfolie van de patroonhuls en neem het patroon uit de huls. Plaats vervolgens het patroon in de novolizer met de dosisteller naar het mondstuk gericht. Zet daarna het deksel opnieuw op de novolizer.