



# NOVOLIZER (Salbutamol, Budesonide, Formoterol)


De Novolizer bestaat uit de volgende delen:

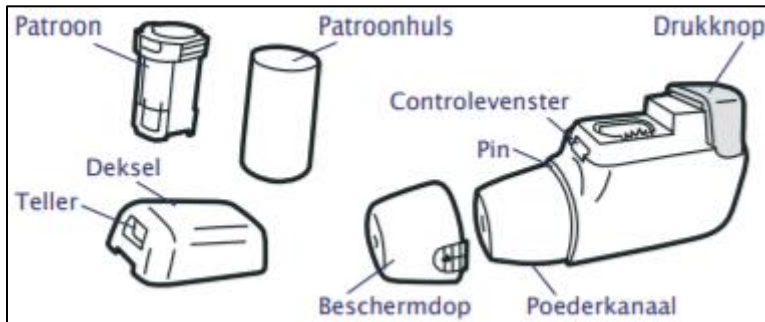


## Vorbereiding: de EERSTE keer een nieuwe Novolizer gebruiken

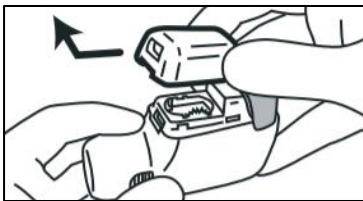

Druk de geribbelde vlakken aan beide kanten van het deksel zachtjes in, schuif het deksel naar voren en til het op.

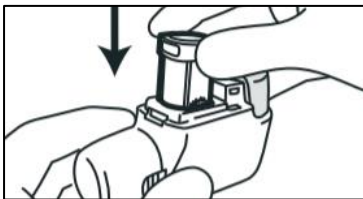


Haal de beschermfolie van de patroonhuls en neem de nieuwe patroon uit de huls. Zet de patroon in de Novolizer met de dosisteller naar het mondstuk gericht.

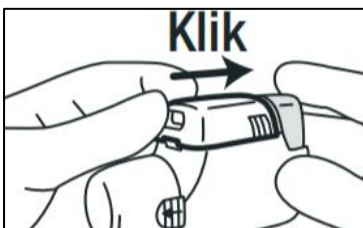


Zet het deksel weer van bovenaf terug en duw het in de richting van de drukknoop tot het op zijn plaats klikt.


## Instructies voor een correct gebruik

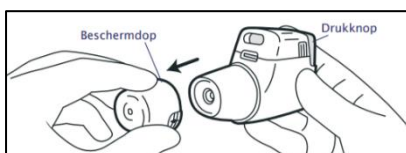


1. Houd de Novolizer met de drukknoop aan de bovenkant. Haal de beschermcap van het mondstuk.

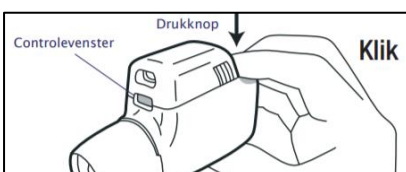


2. Druk de knop aan de achterkant helemaal in. U hoort een dubbele **klik**. Laat daarna de knop los. Doe dit vlak **voordat** u inhaleert. **De kleur** van het controlevenster verandert van **rood** in **groen**.

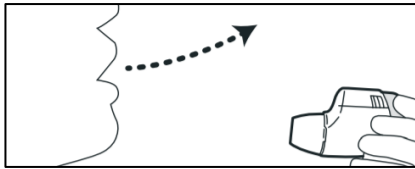


3. Ga rechtop zitten of staan en adem uit. Doe dit langzaam en volledig. Adem **niet** uit in de Novolizer.

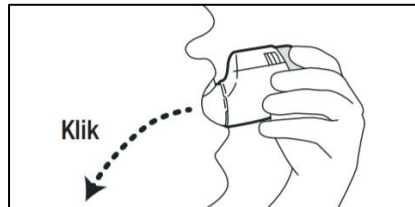

4. Breng de Novolizer naar uw mond en sluit uw lippen eromheen. Adem **krachtig in, zo diep** als u kunt. U ademt goed in als u binnen de eerste seconde een klik hoort. **Blijf inademen na de klik.** Houd uw adem **10 seconden vast** of zo lang als u kunt. Neem de Novolizer uit uw mond. **Adem rustig uit.** Adem niet uit in de Novolizer .

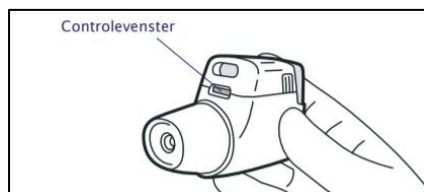


5. **Controleer** of het controlevenster van **groen** in **rood** is veranderd. Heeft u **geen** klik gehoord of verandert de kleur **niet** in rood, **herhaal** dan stap 4 t.e.m. 5. Heeft uw arts meer dan 1 puffje per keer voorgeschreven, herhaal dan stap 2 t.e.m. 5.

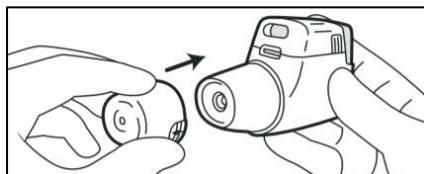


6. Zet de beschermdop op het mondstuk.

7. **Spoel** daarna uw mond **met water** en spuw het water weer uit.


### **Bij vervangen van het patroon:**

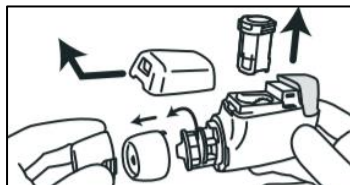


Haal het deksel van de Novolizer af en haal de patroon eruit. Haal daarna de beschermdop eraf. Haal het mondstuk eraf door deze linksom te draaien.

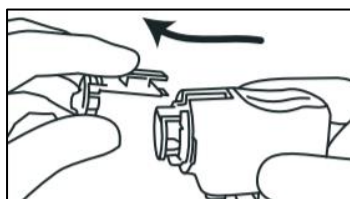

Draai de Novolizer nu ondersteboven. Pak het losse poederkanaal vast en schuif het naar voren en naar boven. Maak het mondstuk, het poederkanaal en de inhalator schoon met een zachte, droge, niet pluizende doek. Klop eventuele poederresten er zachtjes uit. Gebruik **geen** water of reinigingsmiddel.

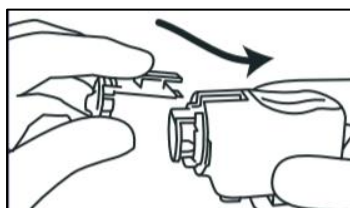

Zet de Novolizer na het schoonmaken in elkaar: maak het poederkanaal vast door het er schuin in te steken. Draai de Novolizer weer om.

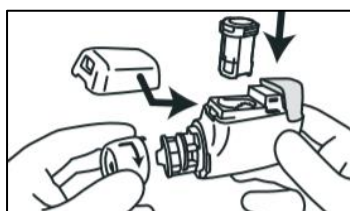

Maak het mondstuk vast door het pinnetje in de groef te steken en naar rechts te draaien. Plaats het patroon in de Novolizer. Zet de beschermdop terug.

### De verzorging van uw inhalator:

Het is aanbevolen om het mondstuk van uw inhalator wekelijks te reinigen met een **schoon, droog tissue of doekje**. Uw inhalator mag **niet met water** gewassen worden. Duw geen doekje of een ander voorwerp in het inwendige van de inhalator omdat hij hierdoor kan beschadigen.

**FILMPJE dat toont hoe iemand de puffer gebruikt: zie onderstaande link:**

<https://www.youtube.com/watch?v=CyapK-AS1Bg>

Naam Document: Informatiefiche puffers	Documenthouder:
Typwerk: Thaisa Cogen – bevoegde afdeling: Apotheek	Goedgekeurd door:
In voege op: augustus 2020	Uitgeprint op