

Douchen

Vóór u onder de douche gaat, moet u eerst de stekker uit de recorder halen en dan de elektroden van de plakkers halen. Daarna kunt u de plakkers van de huid halen en weggooien. Na het douchen moet u de huid goed droogmaken. Na ongeveer 15 minuten -als de huid weer goed droog en afgekoeld is- kunt u de nieuwe plakkers op de huid kleven.

Het is belangrijk om geen bodylotions te gebruiken.

Nadat u de nieuwe plakkers aangebracht heeft, maakt u de elektroden er weer aan de plakkers vast. Als laatste plaatst u de stekker weer in de recorder. Daarna is de recorder klaar om weer op te nemen.

Indien u last heeft van enige irritatie van de huid, kunt u de plakker een beetje verplaatsen om de huid wat tot rust te laten komen. Bevestig de plakker dan vlak naast de geïrriteerde plaats.

Resultaat

Van zodra u enkele opnames heeft gemaakt waarvan u vindt dat ze typisch zijn voor de klachten die u ervaart, kan u contact opnemen met het secretariaat cardiologie voor het uitlezen en bespreken van de resultaten. U hoeft dus in principe de event-recorder geen volle twee weken bij te houden.

Tot slot

Als u vragen heeft over de event-recorder, kunt u contact opnemen met het secretariaat cardiologie:

- telefoonnummer **052 25 29 50**
- bereikbaar elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur.



een onderzoek met de
EVENT-recorder

informatiefiche

Geachte mevrouw, mijnheer

Uw arts heeft u een onderzoek met de event-recorder voorgeschreven omdat u klachten heeft zoals bijvoorbeeld hartritmestoornissen, duizeligheid en/of wegdraaiingen..

Een event-recorder is een apparaatje dat u gedurende een langere periode (meestal een 2-tal weken) bij u draagt. Het is de bedoeling dat u gedurende de periode dat u de recorder heeft, uw normale activiteiten gewoon blijft doen.


Wanneer moet ik de event-knop indrukken?

U drukt op de event-knop wanneer u klachten heeft.

U moet de event-knop slechts éénmaal induwen. De recorder maakt dan gedurende een bepaalde periode vóór en na het drukken een opname van uw hartritme.

Om een goede opname te verkrijgen is het belangrijk dat u, na het drukken op de event-knop, even rustig gaat zitten.

Op de afbeelding ziet u de correcte plaatsing van de elektrodes

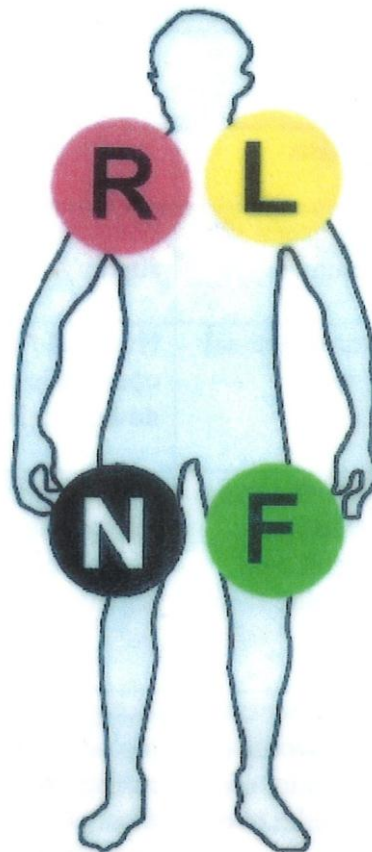

R = rood
L = geel
N = zwart
F = groen

SIGNALLEN	MELDING
LED flinkt groen elke 2 seconden	normaal: toestel is stand-by
LED flinkt tweemaal groen elke 5 seconden	normaal: ECG opname is gestart na duwen op START
LED flinkt elke 2 seconden rood in combinatie met een audiosignaal elke 2 minuten	batterij is bijna leeg: vervang de batterij om verder te kunnen registreren
LED flinkt driemaal rood elke 6 seconden in combinatie met een audiosignaal elke 2 minuten	geheugen is vol: stop de registratie en maak een afspraak: raadpleging cardiologie 052 25 29 50